

InsulinSaver


BRUGSANVISNING

InsulinSaver er et produkt designet til at hjælpe insulinbehandlede diabetikere med at få en idé om hvilke temperaturer deres insulin bliver udsat for eller har været udsat for.

InsulinSaver er indstillet til at give signal ved temperaturer som flere insulinproducenter har fastsat som maksimum-/minimumtemperatur for insulin. (+2 °C til +30 °C)

Batterilevetiden for en InsulinSaver er 12-18 måneder, når enheden er tændt døgnet rundt. Hvis din InsulinSaver er i advarselsmode, reduceres batterilevetiden. Vi giver 1 års garanti under forudsætning af normal brug.


1. Bemærk startdatoen:

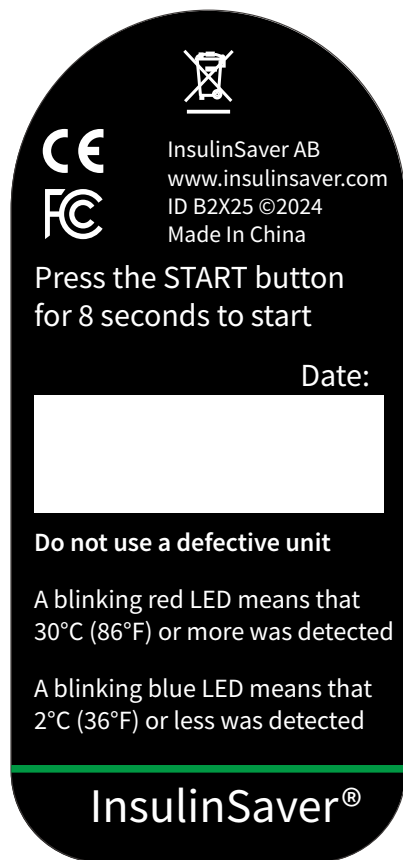

Notér datoen,
når InsulinSaver
startes

Notér datoen hvor du startede din InsulinSaver for at holde styr på batteritiden. Dette gør du på bagsiden af din InsulinSaver


2. Start din InsulinSaver:

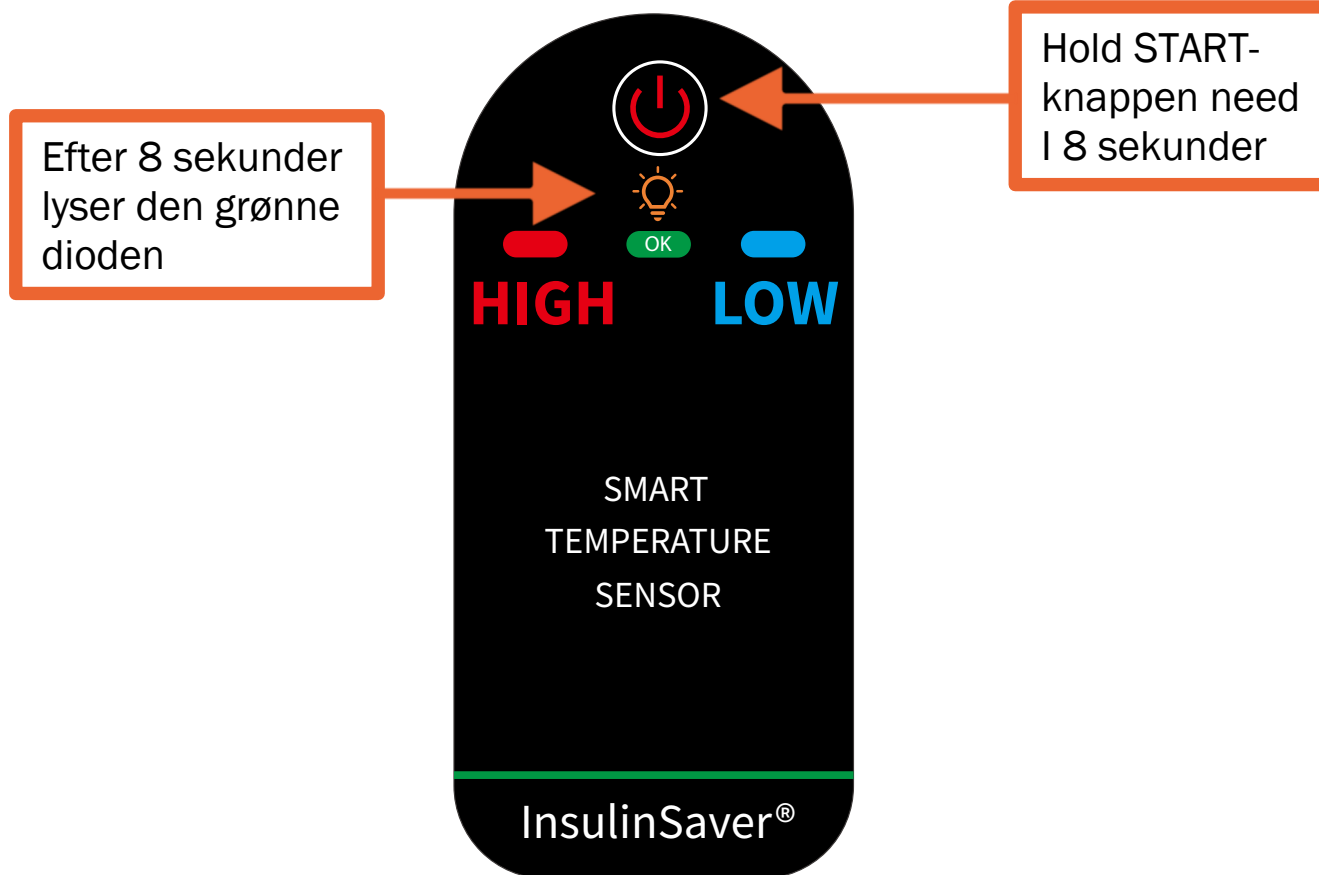

For at starte din InsulinSaver, skal du holde START-knappen inde i 8 sekunder, hvorefter den grønne diode begynder at blinke.


Din InsulinSaver begynder at registrere temperaturen efter 10 minutter.

3. Kontroller, at din InsulinSaver er i gang:

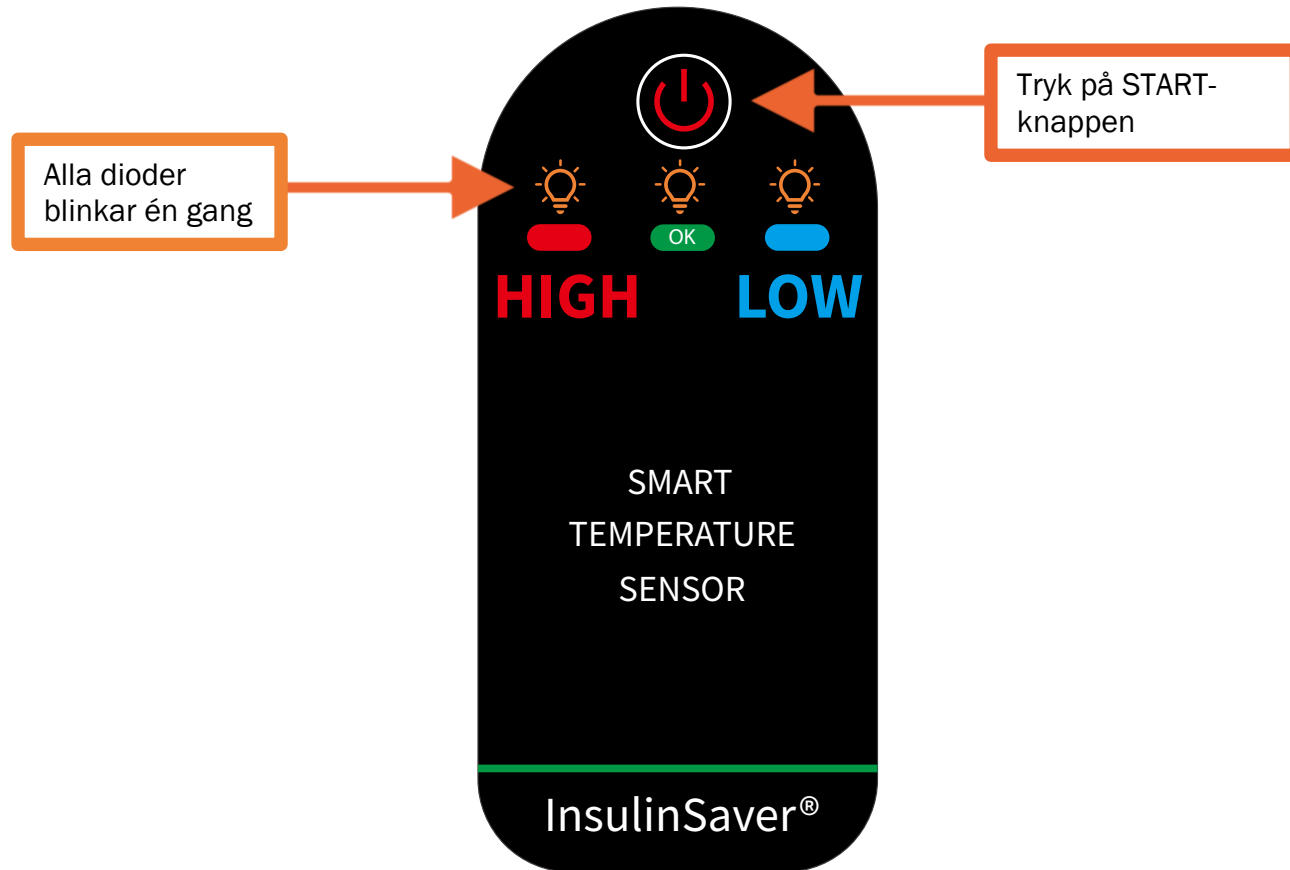


Tryk én gang på START-knappen. Hvis din InsulinSaver er i gang vil alle de tre dioder blinke.

4. Hvordan din InsulinSaver signalerer till dig:

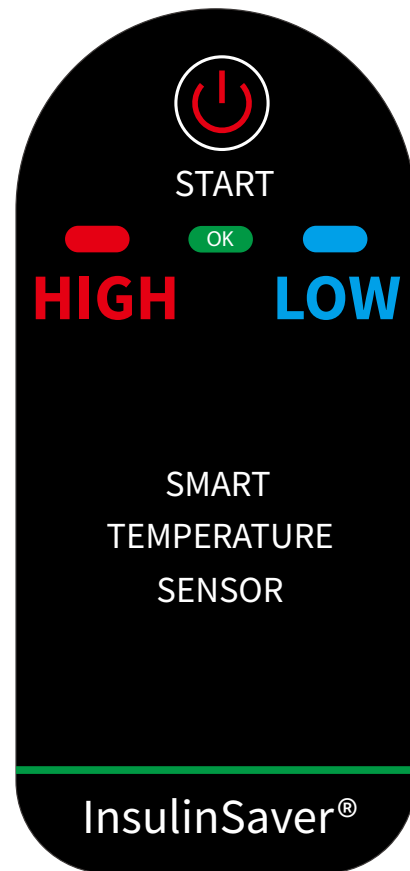


Temperatur inden for +2 til +30°C

Den grønne diode i midten signalerer hver 10. minut, at din InsulinSaver er inden for godkendt temperatur. Bemærk! Du behøver ikke vente på grøn blinken. Se punkt 3 for at kontrollere om din InsulinSaver er tændt.

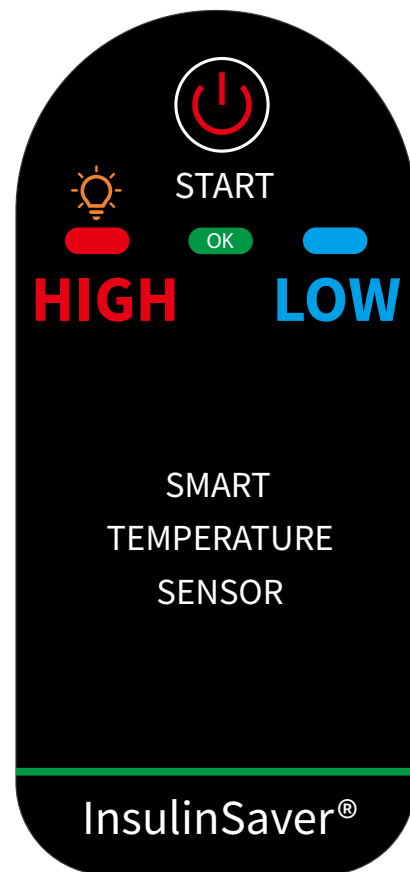

Temperatur over 30°C


Hvis din InsulinSaver har været udsat for en temperatur over 30°C i mere end 5 minutter, vil den røde diode blinke gentagne gange.

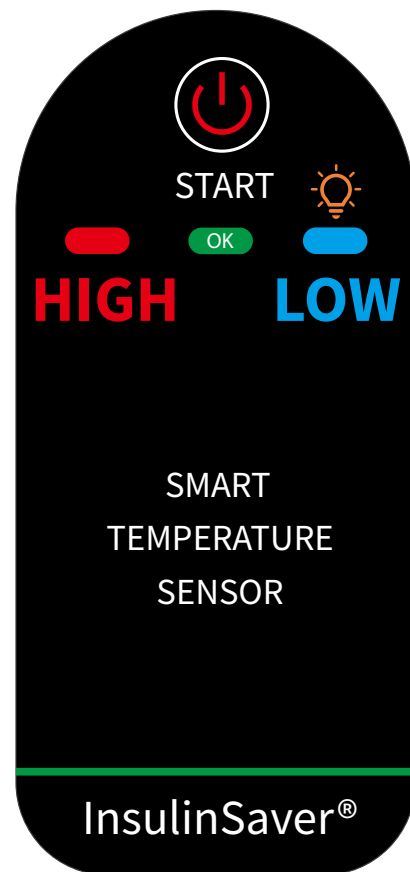

Temperatur under 2°C

Hvis din InsulinSaver har været udsat for en temperatur under 2°C i mere end 5 minutter, vil den blå diode blinke gentagne gange.


5. Sluk/nulstil alarmen på din InsulinSaver:

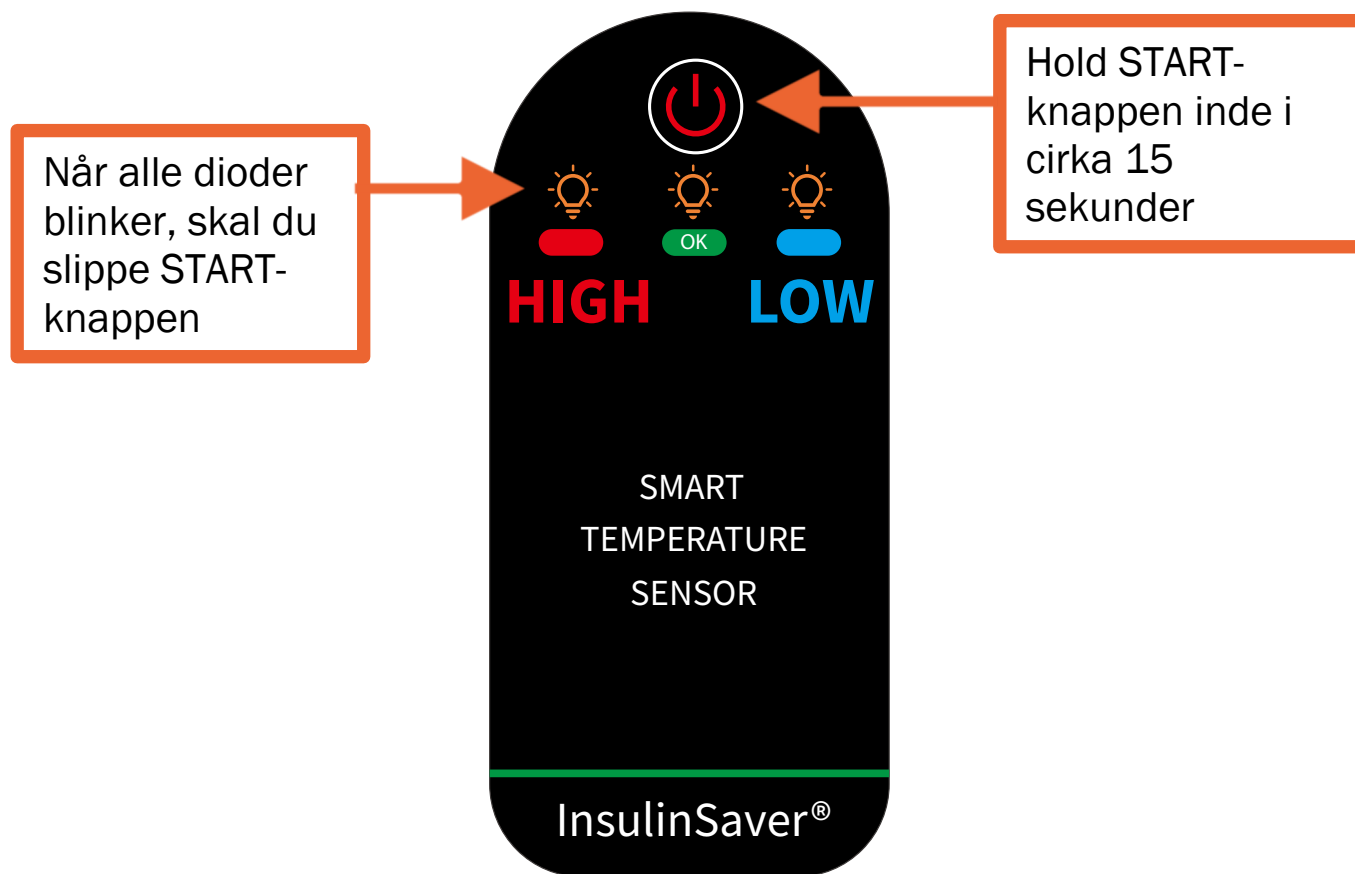

For at slukke din InsulinSaver, hold START-knappen nede i ca. 15 sekunder. Når alle dioderne blinker, slipper du START-knappen. Eventuelle alarmer nulstilles ved slukning

Hvis hensigten var at nulstille alarmen, kan du nu genstarte din InsulinSaver, se punkt 2

6. Kontroller, at din InsulinSaver er slukket:

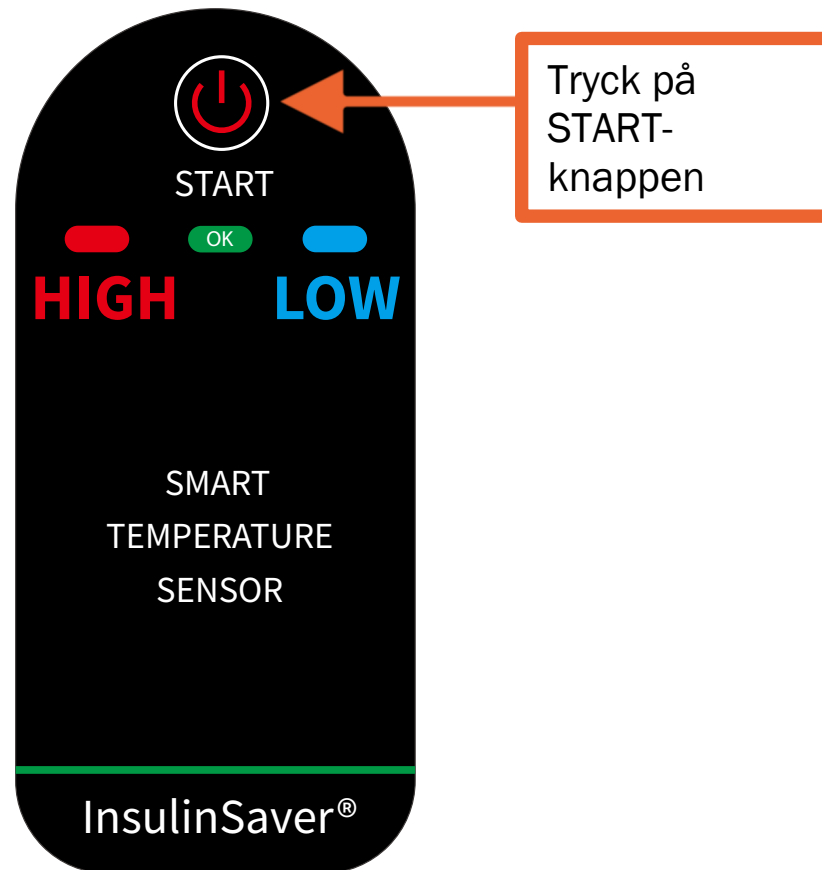

Tryk én gang på START-knappen. Hvis din InsulinSaver er slukket, blinker ingen af dioderne

OBSERVER!

InsulinSaver er ingen garanti for at dit insulin er brugbart under alle omstændigheder, men derimod et hjælpemiddel til at øge din tryghed.

InsulinSaver tåler ikke kraftige stød eller kraftigt tryk.

Affaldshåndtering

Smid ikke din InsulinSaver i husholdningsaffaldet.

InsulinSaver skal sorteres som elektronikaffald.

Batteriskift → <https://www.insulinsaver.com/battery-replacement>

Produktsupport → info@insulinsaver.com

INSULINSAVER-ENHEDEN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER. INSULINSAVER ER IKKE ET MEDICINSK USTYR OG ER IKKE BEREGNET TIL AT DIAGNOSTICERE, BEHANDLE, HELBREDE ELLER FOREBYGGE NOGEN SYGDOM. DET ER UDELUKKENDE BEREGNET SOM ET HJÆLPEMIDDEL TIL AT ØGE OPMÆRKSOMHEDEN OM OMGIVENDE TEMPERATURFORHOLD. INSULINSAVER-ENHEDEN OPFYLDER DE GÆLDENDE CE-KRAV I DEN EUROPÆISKE UNION OG OVERHOLDER FCC-REGLERNE I USA VEDRØRENDE ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.

EU-ANSVARLIG PERSON / PRODUCENT:

INSULINSAVER AB

GUNNERÖD 609

472 91 STILLINGSÖN

SWEDEN

DESIGNET I SVERIGE. FREMSTILLET I KINA. EMBALLAGE: PE. MANUAL: PAPIR.

