

InsulinSaver


MANUEL UTILISATEUR

InsulinSaver est un produit développé pour aider les diabétiques sous traitement à l'insuline à avoir une idée des températures auxquelles l'insuline est ou a été exposée.

InsulinSaver est réglé pour émettre un signal à des températures que plusieurs fabricants d'insuline ont fixées comme température maximale/minimale, +2 °C à +30 °C.

La durée de vie de la batterie d'un InsulinSaver est de 12 à 18 mois dans des conditions normales. Une garantie de 12 mois s'applique tant que la batterie de l'appareil n'a pas été épuisée.


1. Notez la date

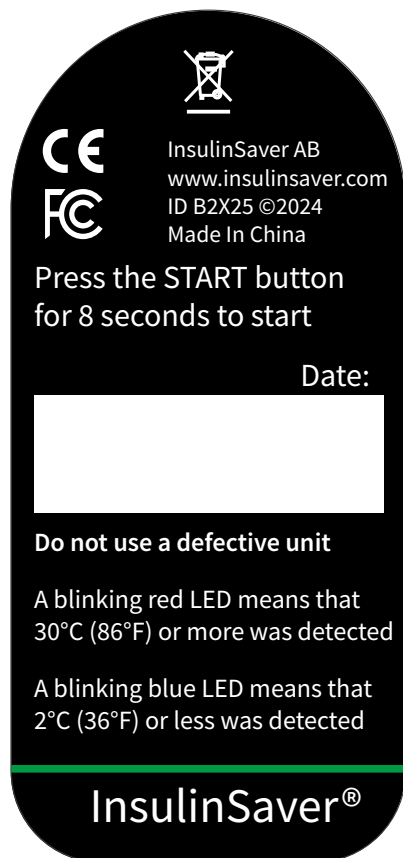

Notez la date à laquelle votre InsulinSaver a été démarré

Notez la date à laquelle vous avez commencé à utiliser votre InsulinSaver pour suivre la durée de vie de la batterie. Vous pouvez le faire à l'arrière de votre InsulinSaver


2. Démarrez votre InsulinSaver :

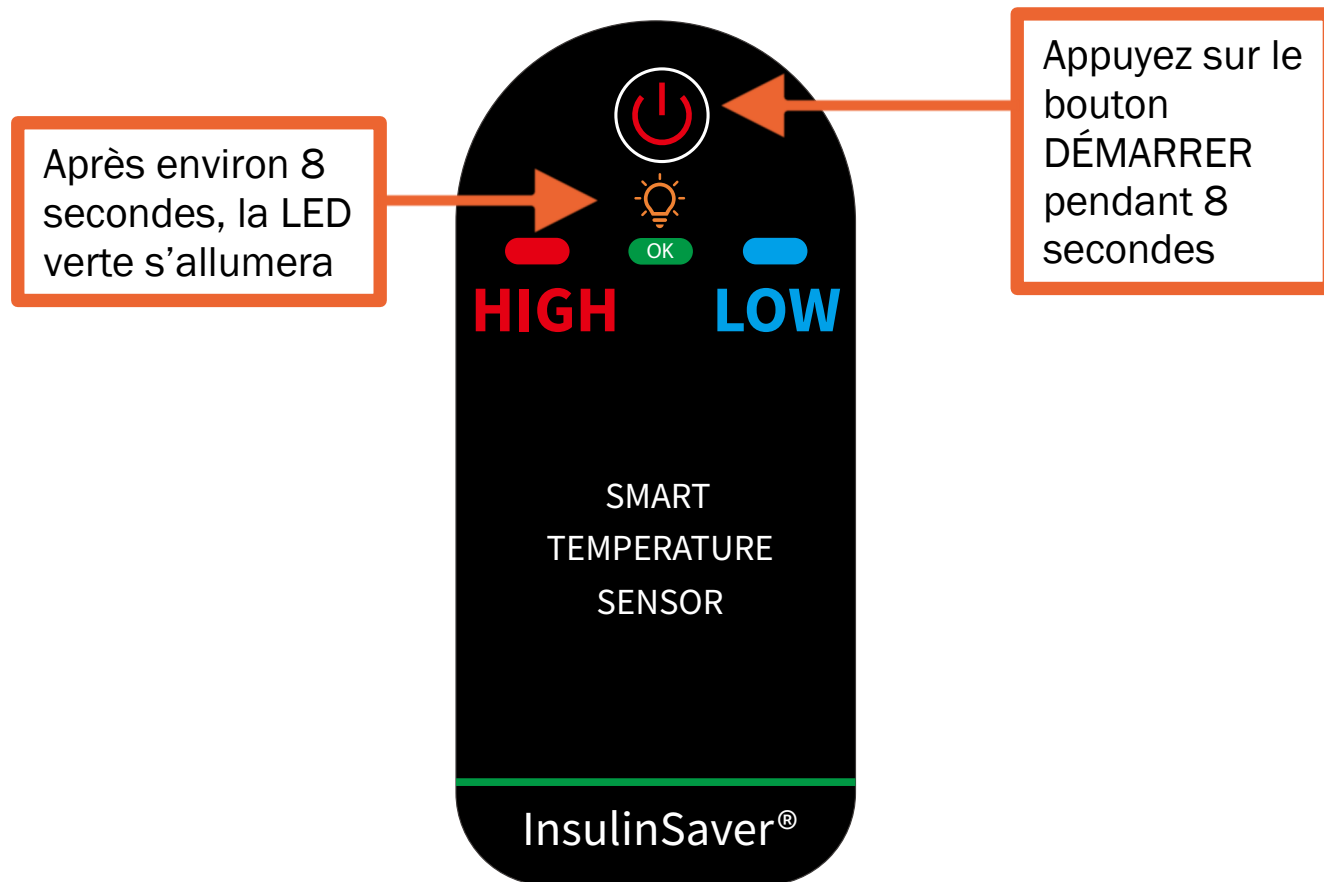

Pour démarrer votre InsulinSaver, maintenez enfoncé le bouton DÉMARRER pendant 8 secondes et la LED verte s'allumera.


Votre InsulinSaver commence à enregistrer et à analyser la température après 10 minutes.

3. Vérifiez que votre InsulinSaver est en marche :

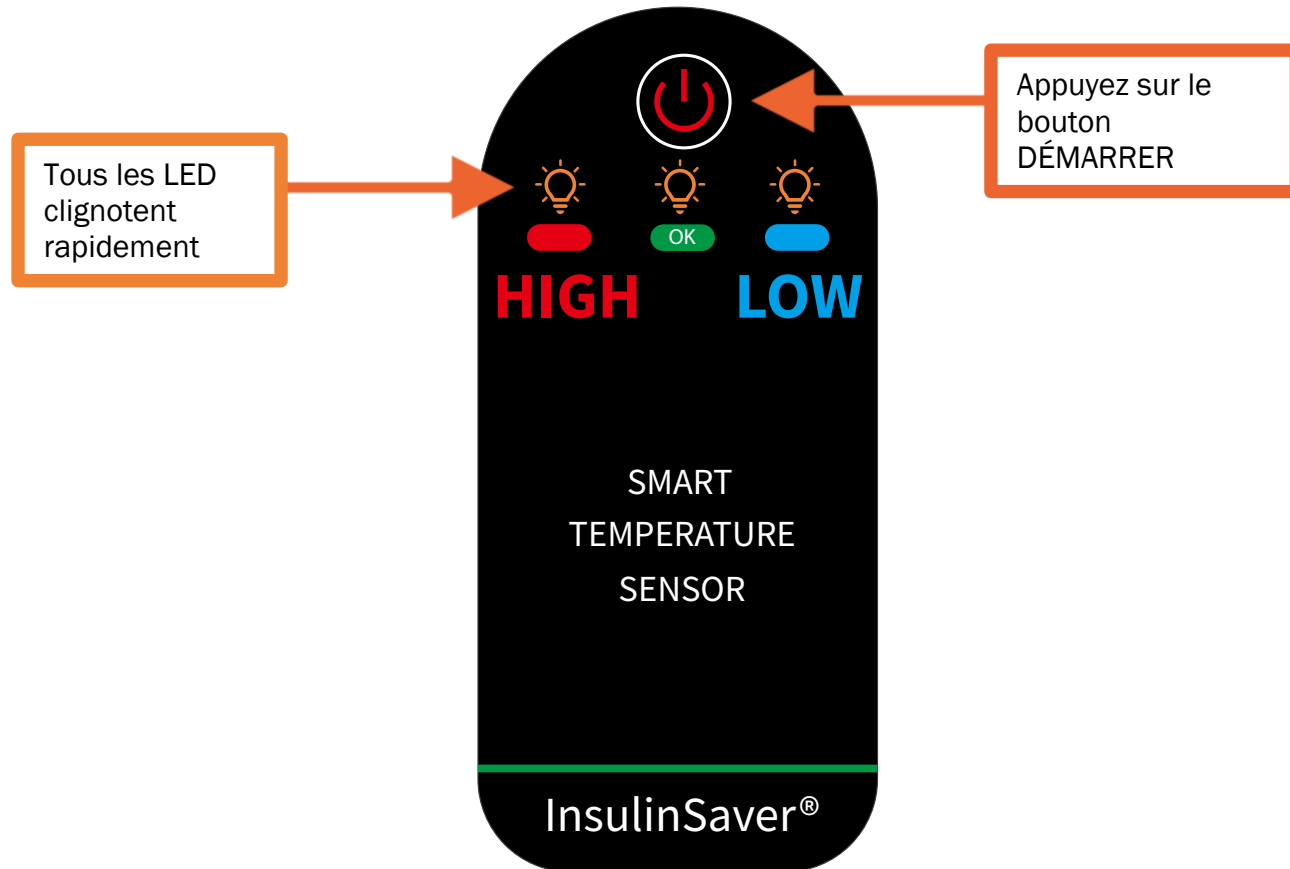


Appuyez une fois sur le bouton DÉMARRER. Si votre InsulinSaver est en cours d'exécution, les trois LED clignoteront.

4. Comment votre InsulinSaver vous signale :

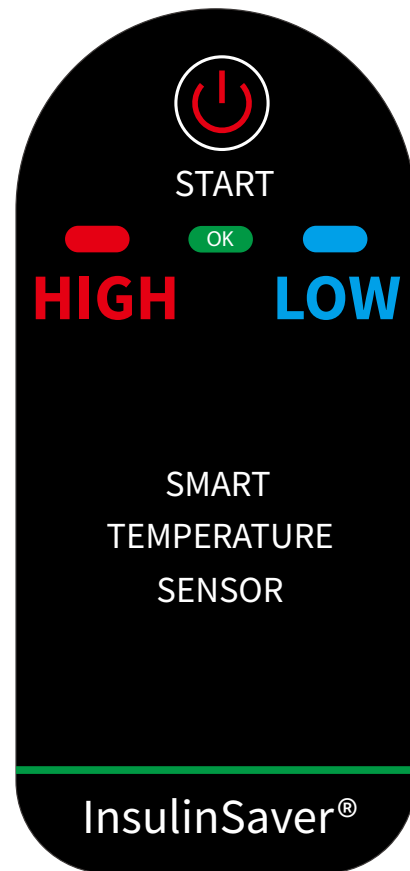


Température comprise entre 2 et 30°C

La LED verte, au milieu, signale toutes les 10 minutes que votre InsulinSaver est et a été à une température approuvée. Remarque : Pas besoin d'attendre 10 minutes. Voir la section 3

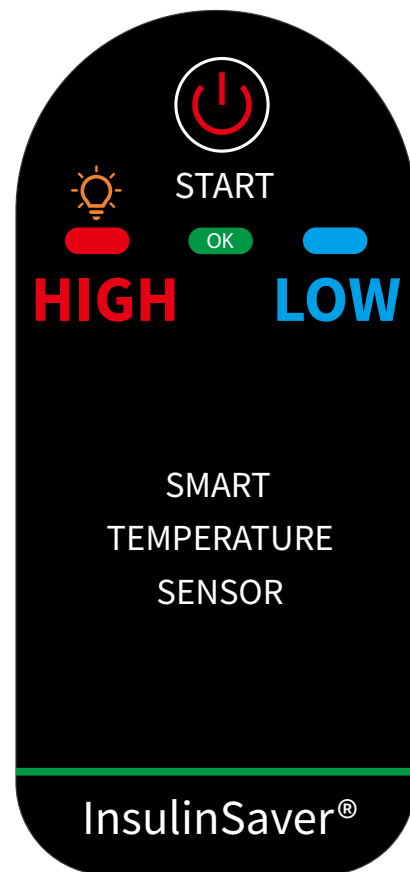

Température au-dessus de 30°C

Si votre InsulinSaver a été exposé à une température supérieure à 30°C, la LED rouge clignotera de manière répétitive

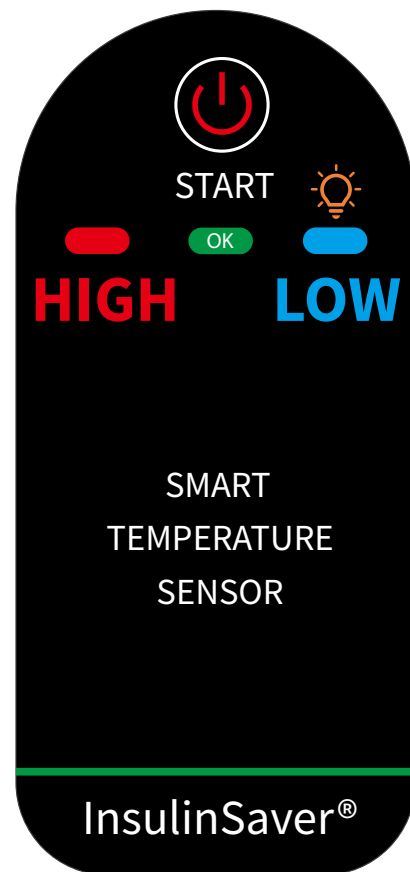


Température en dessous de 2°C

Si votre InsulinSaver a été exposé à une température inférieure à 2°C, la LED bleue clignotera de manière répétitive.

5. Éteignez/réinitialisez votre InsulinSaver :


Lorsque tous les LED clignotent, relâchez le bouton DÉMARRER

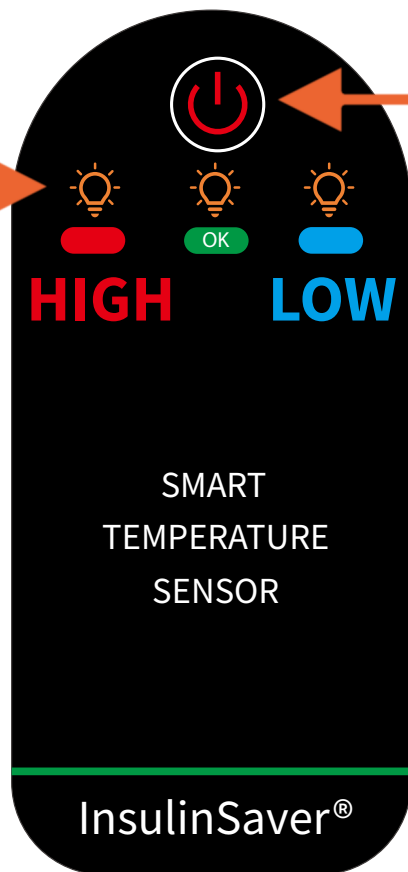

Appuyez sur le bouton DÉMARRER pendant environ 15 secondes

Pour éteindre votre InsulinSaver, appuyez et maintenez enfoncé le bouton DÉMARRER pendant environ 15 secondes. Lorsque toutes les LED clignotent, relâchez le bouton DÉMARRER. Tous les signaux d'alarme seront rétablis. Si l'intention était de réinitialiser l'appareil, vous pouvez maintenant procéder à le redémarrer (voir section 2)

6. Vérifiez que votre InsulinSaver est éteint :

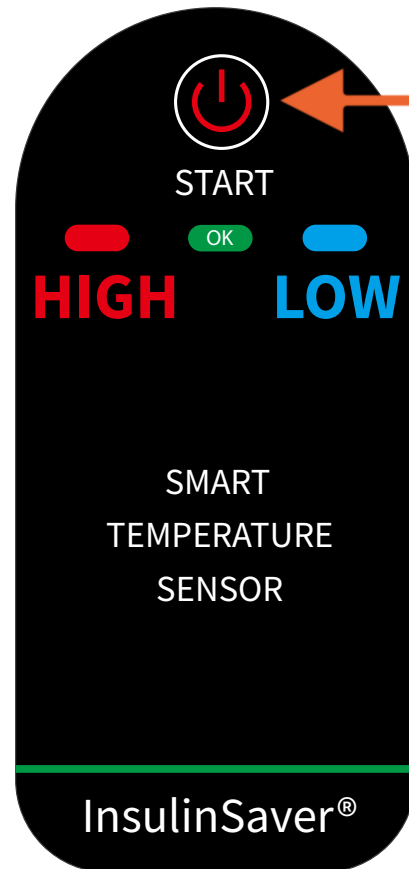

Appuyez sur le bouton DÉMARRER

Appuyez une fois sur le bouton DÉMARRER. Si votre InsulinSaver est éteint, aucune LED ne clignotera.

REMARQUE!

**InsulinSaver ne garantit pas que votre insuline puisse être utilisée dans toutes les situations.
InsulinSaver est un moyen d'accroître votre conscience des températures.
InsulinSaver ne résiste pas aux chocs violents ni aux fortes pressions.**

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

**Ne jetez pas votre InsulinSaver avec les déchets ménagers.
L'InsulinSaver doit être mis au rebut en tant que déchet électronique.**

Remplacement de la batterie → <https://www.insulinsaver.com/battery-replacement>

Assistance produit → info@insulinsaver.com

LE DISPOSITIF INSULINSAVER EST FOURNI « TEL QUEL », SANS AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. INSULINSAVER N'EST PAS UN DISPOSITIF MÉDICAL ET N'EST PAS DESTINÉ À DIAGNOSTIQUER, TRAITER, GUÉRIR OU PRÉVENIR UNE MALADIE QUELCONQUE. IL EST DESTINÉ UNIQUEMENT À AIDER À SENSIBILISER AUX CONDITIONS DE TEMPÉRATURE AMBIANTE. LE DISPOSITIF INSULINSAVER EST CONFORME AUX EXIGENCES CE APPLICABLES DANS L'UNION EUROPÉENNE ET RESPECTE LES RÉGLEMENTATIONS DE LA FCC DES ÉTATS-UNIS EN MATIÈRE DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE.

PERSONNE RESPONSABLE DANS L'UE / FABRICANT :

INSULINSAVER AB

GUNNERÖD 609

472 91 STILLINGSÖN

SWEDEN

CONÇU EN SUÈDE. FABRIQUÉ EN CHINE. EMBALLAGE : PE. MANUEL : PAPIER.



V. 20260108