

InsulinSaver

BRUKSANVISNING


InsulinSaver är en produkt framtagen för att hjälpa insulinbehandlade diabetiker att få en uppfattning om vilka temperaturer ens insulin blir eller har blivit utsatta för.

InsulinSaver är inställd på att ge signal vid temperaturer som flera insulinproducenter har satt som max-/min-temperatur för insulin, dvs. $+2^{\circ}\text{C}$ till $+30^{\circ}\text{C}$.

Batteritiden för en InsulinSaver är 12-18 månader när enheten är påslagen dygnet runt. Om din InsulinSaver är i varnings läge minskar batteritiden.

Vi lämnar 1 års garanti, förutsatt normalt användande.


1. Notera datum för start:

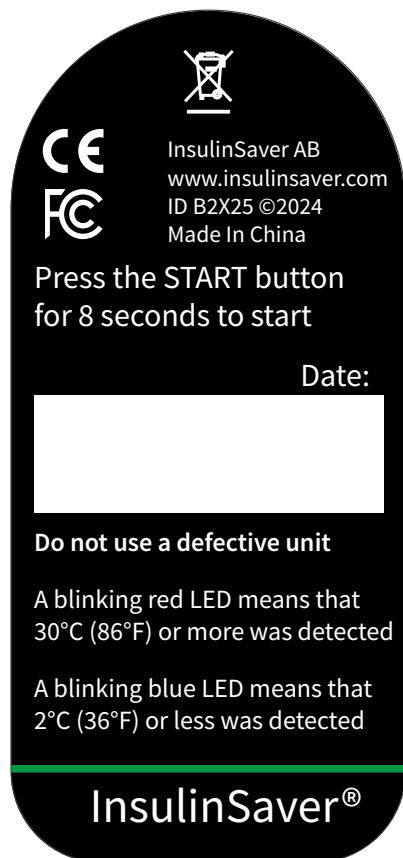

Notera datum
när InsulinSaver
startas


Notera datumet som du startade din InsulinSaver för att hålla koll på batteritiden. Detta gör du på baksidan av din InsulinSaver.

2. Starta din InsulinSaver:

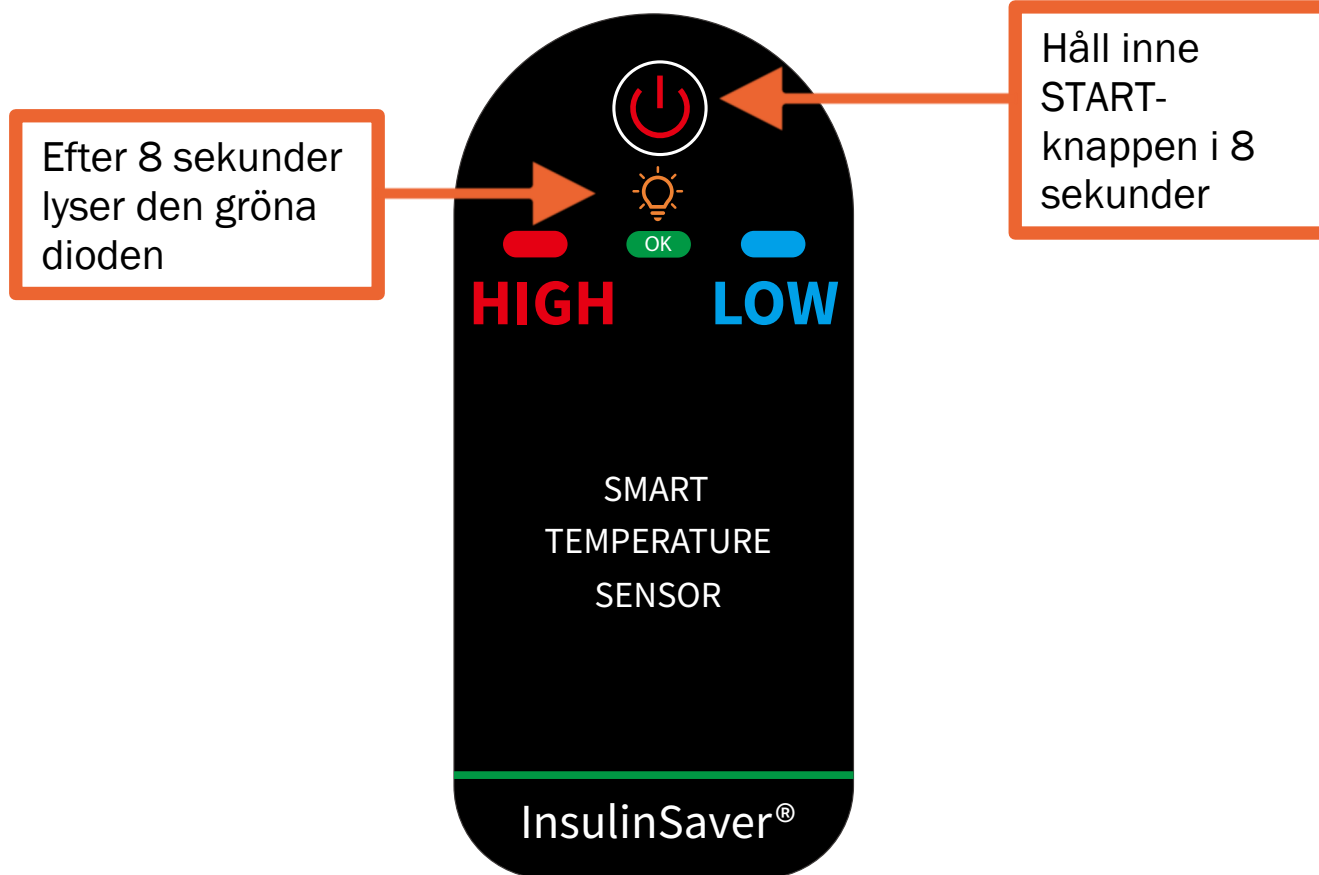


För att starta din InsulinSaver, håll inne START-knappen i 8 sekunder varpå den gröna dioden kommer blinka till. Din InsulinSaver påbörjar registrering av temperatur efter 10 minuter.

3. Kontrollera att din InsulinSaver är i gång:

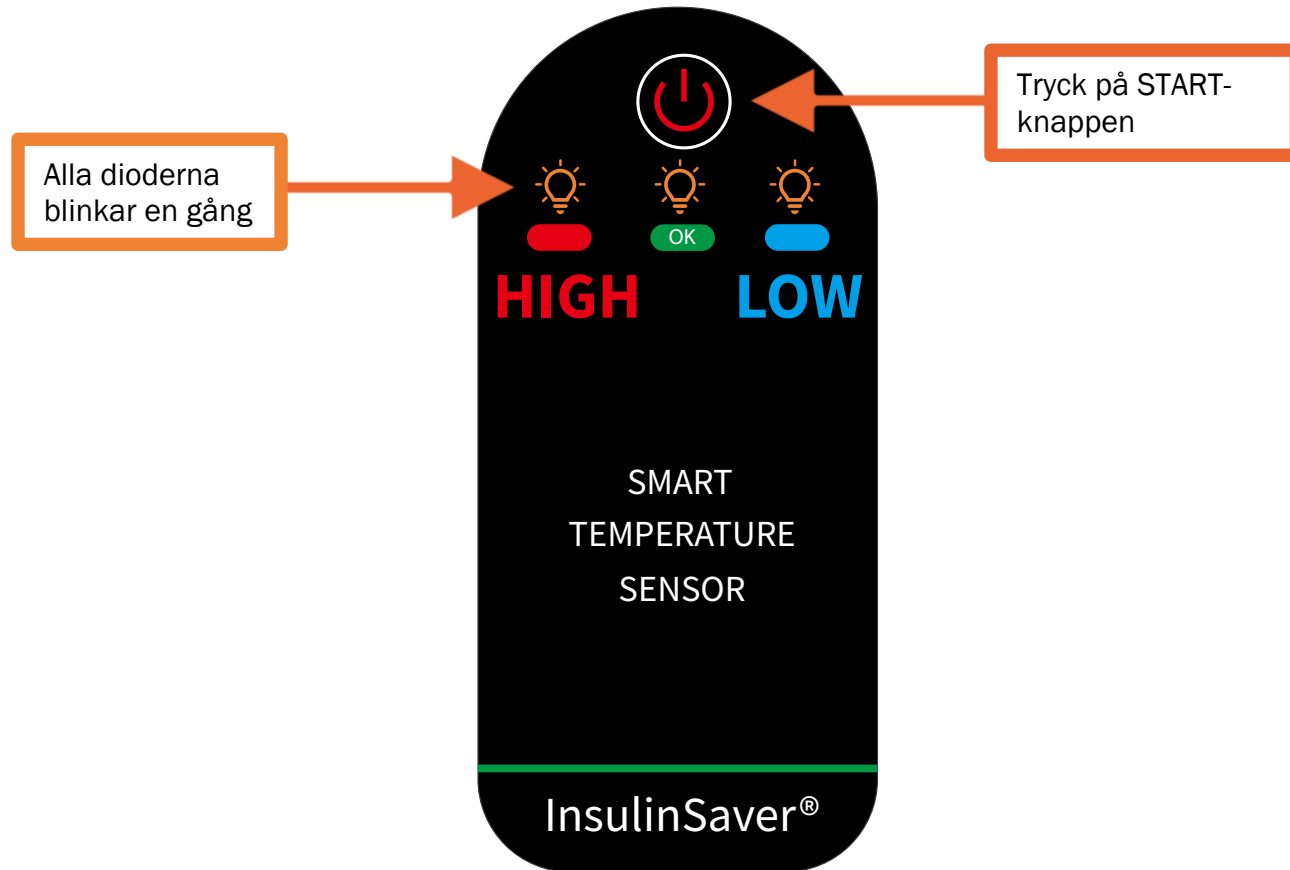


Tryck en gång på START-knappen, om din InsulinSaver är i gång ska alla de tre dioderna blinka till.

4. Hur din InsulinSaver signalerar till dig:

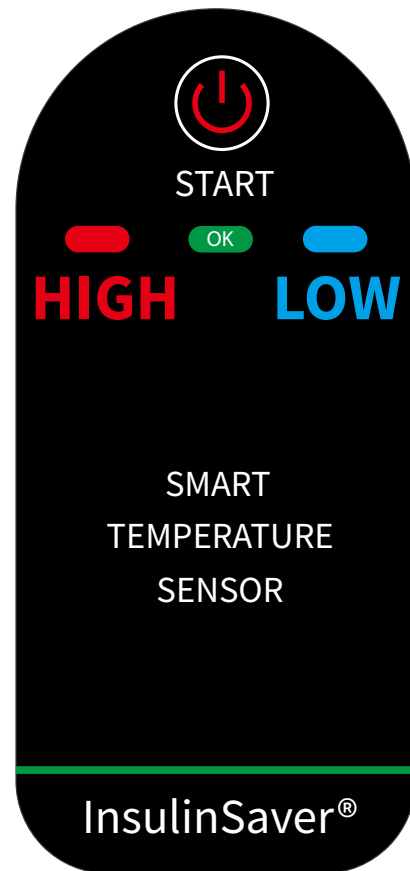

Temperatur inom 2-30°C


Alla dioder, även den gröna, är släckta. Osäker på om din InsulinSaver funkar som den skall? Tryck på START-knappen en gång. Om alla tre LEDs lyser upp funkar allt som det skall.

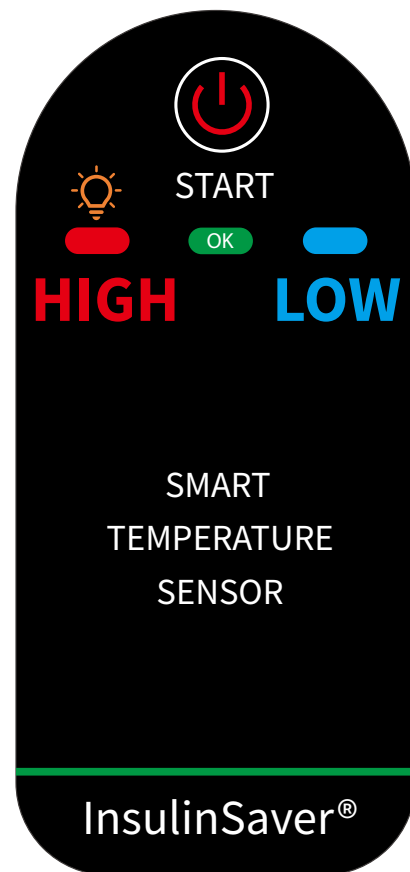

Temperatur över 30°C

Om din InsulinSaver har utsatts för en temperatur över 30 °C i mer än 5 minuter så kommer den röda dioden att blinka repetitiv.

Notera: Din InsulinSaver fortsätter att blinka tills att du stänger av den, när du sedan sätter på den igen så är blinkningen borta.

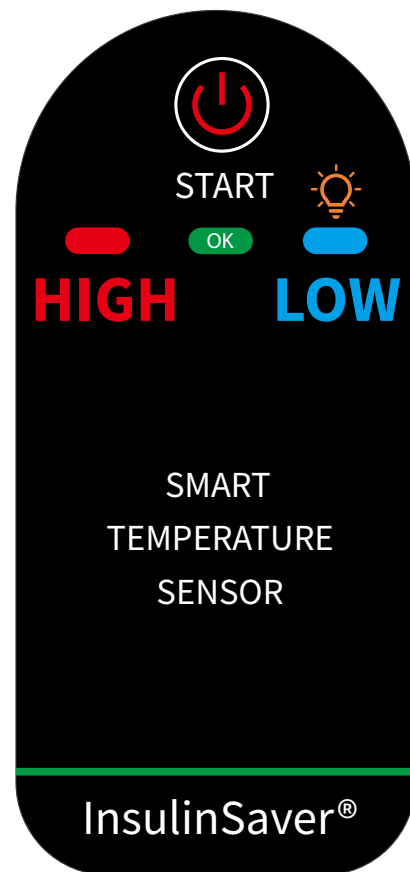


Temperatur under 2°C

Om din InsulinSaver har utsatts för en temperatur under 2°C i mer än 5 minuter så kommer den blå dioden att blinka repetitiv.


Notera: Din InsulinSaver fortsätter att blinka tills att du stänger av den, när du sedan sätter på den igen så är blinkningen borta.

5. Stäng av/nollställ larm på din InsulinSaver:

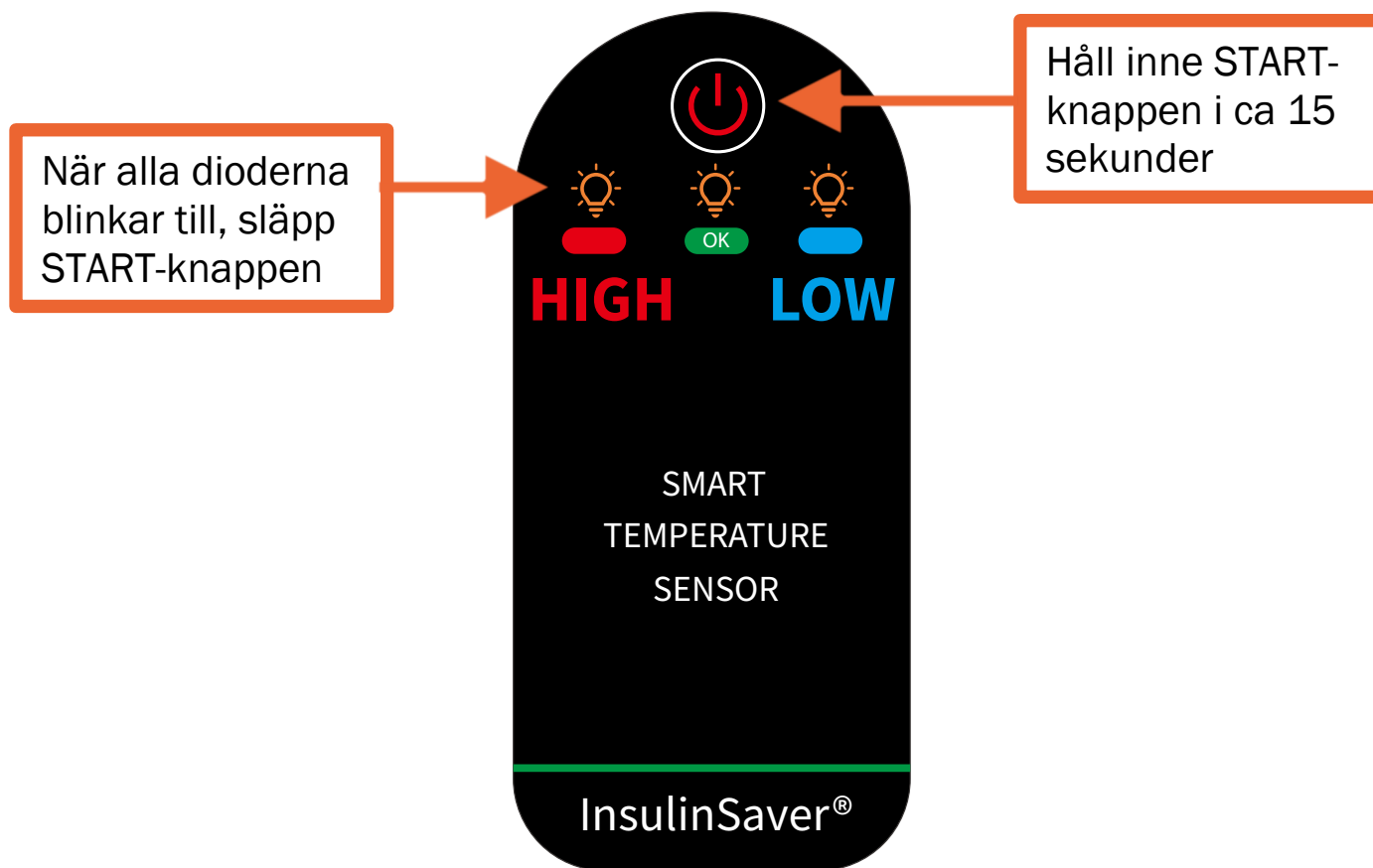

För att stänga av din InsulinSaver, håll inne START-knappen i ca. 15 sekunder. När alla dioderna blinkar till släpper du START-knappen. Eventuella larm kommer att nollställas vid en avstängning. Om avsikten var att nollställa larm kan du nu starta din InsulinSaver igen, se punkt 2.

6. Kontrollera att din InsulinSaver är avstängd:

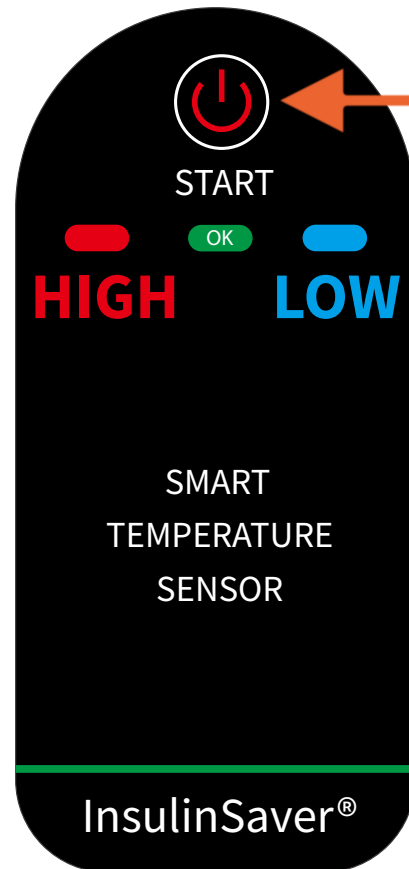

Tryck på START-knappen

Tryck en gång på START-knappen. Om din InsulinSaver är avstängd blinkar då inga dioder.

OBSERVERA!

InsulinSaver är ingen garanti att ditt insulin är brukbart i alla lägen, utan ett hjälpmedel för att öka din trygghet.

InsulinSaver tål inte kraftiga stötar eller kraftigt tryck.

Avfallshantering

Kasta inte din InsulinSaver i hushållssoporna. InsulinSaver sopsorteras som elektronikavfall.

Batteribyte → <https://www.insulinsaver.se/batteribyte>

Produktsupport → info@insulinsaver.com

INSULINSAVER-ENHETEN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. INSULINSAVER ÄR INTE EN MEDICINTEKNISK PRODUKT OCH ÄR INTE AVSEDD ATT DIAGNOSTISERA, BEHANDLA, BOTA ELLER FÖREBYGGA NÅGON SJUKDOM. DEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM ETT HJÄLPMEDEL FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN OM OMGIVANDE TEMPERATURFÖRHÅLLANDEN. INSULINSAVER-ENHETEN UPPFYLLER TILLÄMPLIGA CE-KRAV INOM EUROPEISKA UNIONEN OCH ÖVERENSSTÄMMER MED FCC-REGLERNA I USA AVSEENDE ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.

EU-ANSVARIG PERSON / TILLVERKARE:

INSULINSAVER AB

GUNNERÖD 609

472 91 STILLINGSÖN

SWEDEN

DESIGNAD I SVERIGE. TILLVERKAD I KINA. FÖRPACKNING: PE. MANUAL: PAPPER.



V. 20260108